

# DR Doppel-Pumpe

Ref. Nr. ARTH-PUMP-A



Die DR Doppel-Pumpe ist ein integriertes Flüssigkeitsmanagementsystem für Zu- und Abflüsse.

Das System steuert die Spülung automatisch als Funktion der Absaugung und sorgt so für eine Durchflussrate und einen genau gesteuerten Druck.

## Funktionen

- Automatische Steuerung von Zu- und Abfluss: Kontrolle von Durchfluss und Druck
- Integriertes Shaver-Interface für die meisten Shavermarken
- Erhöhte Reaktionsfähigkeit für einen optimalen Komfort während des Gebrauchs
- Druckmesswerte in mmHg oder LH2O
- Vertraute Benutzeroberfläche
- Die arthroskopischen Schlauchsets sind für die Spülung von Gelenkhöhlen mit Kochsalzlösung und Aspiration zur Entfernung von Ablagerungen während chirurgischer Eingriffe ausgelegt.

***Ist sehr benutzerfreundlich  
und einfach in der Handhabung.***

## Technische Daten

Druckbereich	20 – 280 mmHg (10 – 120 LH2O)
Durchflussrate der Kanüle	Ruhezustand: 100 ml/min ± 50 ml/min Min: 200 ml/min ± 50 ml/min Tief: 300 ml/min ± 75 ml/min Mittel: 500 ml/min ± 75 ml/min Hoch: 600 ml/min ± 75 ml/min
Shaver Durchflussrate	Min: 200 ml/min ± 50 ml/min Tief: 400 ml/min ± 75 ml/min Mittel: 600 ml/min ± 75 ml/min Hoch: 800 ml/min ± 100 ml/min
Technische Daten elektrisch	Leitungsspannung: 100 - 240 VAC Frequenz: 50-60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 500 VA
Masse (B x H x T)	434 x 202 x 377 mm
Gewicht	11 kg

# Technische Parameter

## DR Tages Set Schlauch


Ref. Nr. AV4503

Der Tages Set Schlauch ist ein Spülschlauch, der eine Salzlösung (aus einem Beutel) in den Zwischenschlauch befördert.

Der Tages Set Schlauch kann dank eines Einwegventils am Patientenschlauch oder mit dem Zwischenschlauch wiederverwendet werden, wodurch Sie Kosten sparen können:

- Mit einem einzigen Spülschlauch für den gesamten Arbeitstag
- Indem Sie den Verbrauch von Flüssigkeitsbeuteln reduzieren
- Durch das Einsparen von Zeit für die Montage der neuen Schläuche

Verpackungsgröße / Box zu 30 Stück steril

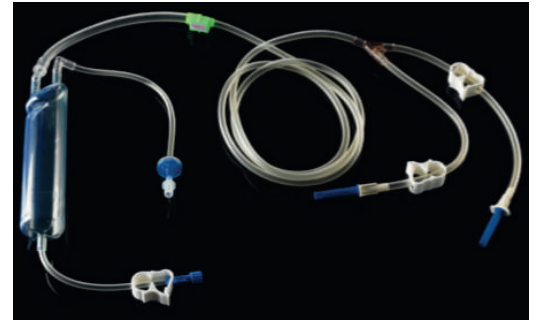

## DR Zwischenschlauch mit Rückschlagventil

Ref. Nr. AV1102

Der Zwischenschlauch mit Rückschlagventil ist ein Spülschlauch, der an den DR Tages Set Schlauch angeschlossen wird.

Wenn nur eine Spülung erforderlich ist, wird der Zwischenschlauch in Kombination mit dem DR Tages Set Schlauch verwendet.

Verpackungsgröße / Box zu 50 Stück steril



## DR Patientenschlauch mit Rückschlagventil

Ref. Nr. AV4509

Der DR Patientenschlauch mit Rückflussverhinderer wird in Verbindung mit dem DR Tages Schlauch Set verwendet, sobald die Spülung und die Abflusssteuerung erforderlich ist.

Der DR Patientenschlauch beinhaltet:

- Zwischenrohr mit Rückschlagventil
- Abflussschlauch, der an die Aspirationskanüle oder an das DR Handstück angeschlossen wird, um Blut und Ablagerungen zu einem Abfallsammler zu entfernen.

Verpackungsgröße / Box zu 30 Stück steril



## DR 2-Wege Fusspedal

Ref. Nr. ARTH-PED2-A

Vorgesehen zur Verwendung in Kombination mit Shaver Interface Clip oder Integrated Shaver Interface.

## DR 4-Wege Fusspedal

Ref. Nr. ARTH-PED4-A

Vorgesehen zur Verwendung in Kombination mit dem Fusspedal Interface.



Legal Manufacture: Hemodia SAS / 85 rue du Chêne vert / 31670 Labège / France / [www.hemodia.com](http://www.hemodia.com)

Version001\_DE